

SERVUS!TM



Каталог
інструментів
IXION



ТОЧНІСТЬ, ЩО СЛУЖИТЬ РОКАМИ

Чому ортоданти в усьому світі обирають Ixion?

В ортодонції має значення кожен міліметр — і саме інструменти Ixion найкраще демонструють, наскільки важливими у щоденній роботі лікаря є точність, надійність і передбачуваний результат.

Понад 20 років ортоданти в усьому світі довіряють Ixion — інструментам, що задають високий стандарт якості, довговічності та стабільної роботи. Від прецизійно заточених кусачок до ідеально збалансованих щипців — кожен інструмент Ixion забезпечує комфортний контроль під час роботи та надійно служить роками.

ПРЕМІАЛЬНА ЯКІСТЬ У КОЖНІЙ ДЕТАЛІ

Інструменти виготовляються з німецької хірургічної нержавіючої сталі. Кожен виріб проходить індивідуальну перевірку командою контролю якості DB Orthodontics, щоб до вашої клініки потрапляли лише інструменти найвищого рівня.

Ключові переваги:

- точність і стабільний контроль під час кожної процедури;
- збалансована конструкція та комфорт у роботі;
- високоякісні матеріали й ретельний контроль якості;
- довговічність, розрахована на щоденне професійне використання.

ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ IXION



РІЖУЧІ ІНСТРУМЕНТИ

02-03

ДОПОМІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ

04-05

ЩИПЦІ ДЛЯ ВИГІНАННЯ ДУГ

06-09

РУЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАТИСКАЧІ

10-14

ПІДСТАВКИ ТА ОРГАНАЙЗЕРИ

15



РІЖУЧІ ІНСТРУМЕНТИ



IX900

IX900

КУСАЧКИ ДИСТАЛЬНІ

Ріжуть дугу близько до щічної трубки та безпечно утримують її дистальний кінець. Твердосплавні вставки забезпечують точний зріз, зносостійкість і високу ефективність різання.

Підходять для дуг до .021" x .025" / 0,55 x 0,64 мм.



СКАНУЙТЕ
для перегляду
відеоінструкції



IX901

IX901

КУСАЧКИ ДИСТАЛЬНІ, З ДОВГОЮ РУЧКОЮ

Подовжені ручки та компактна робоча частина забезпечують зручний доступ до важкодоступних ділянок. Кусачки ріжуть дугу близько до щічної трубки та безпечно утримують дистальний кінець. Твердосплавні вставки забезпечують точний зріз і довгий термін служби.

Підходять для дуг до .021" x .025" / 0,55 x 0,64 мм.



IX902

IX902

КУСАЧКИ ДИСТАЛЬНІ ЗА ТИПОМ FLUSH CUT

Функція flush cut дозволяє зрізати дугу врівень із дистальним кінцем щічної трубки, зменшуючи ризик дискомфорту для пацієнта через виступання дуги. Кусачки безпечно утримують відрізаний кінець. Твердосплавні кінчики забезпечують точне різання.

Ріжуть дуги від .016" / 0,41 мм до .021" x .025" / 0,55 x 0,64 мм.



СКАНУЙТЕ
для перегляду
відеоінструкції



IX958

IX958

КУСАЧКИ ДИСТАЛЬНІ ЗА ТИПОМ FLUSH CUT, З ДОВГОЮ РУЧКОЮ

Зрізають дугу врівень із щічною трубкою та зменшують ризик дискомфорту через виступання дуги. Твердосплавні вставки забезпечують точний зріз.

Для дуг від .016" / 0,41 мм до .021" x .025" / 0,55 x 0,64 мм.



IX905

IX905

КУСАЧКИ ДЛЯ ТВЕРДОГО ДРОТУ, ПРЯМІ

Твердосплавні вставки забезпечують точний зріз і надійне змикання кінчиків.

Для різання дуг
від .012" / 0,30 мм до .021" x .025" / 0,55 x 0,64 мм.



IX906

IX906

КУСАЧКИ ДЛЯ ТВЕРДОГО ДРОТУ З КУТОМ НАХИЛУ 15°

Кут 15° полегшує доступ до бокових ділянок.

Твердосплавні вставки забезпечують точний зріз дуг
від .012" / 0,30 мм до .021" x .025" / 0,55 x 0,64 мм.



IX910

IX910

КУСАЧКИ ЛІГАТУРНІ З КУТОМ НАХИЛУ 7°

Кутові робочі кінчики 7° забезпечують зручний доступ і кращу видимість у важкодоступних ділянках. Твердосплавні вставки допомагають точно різати лігатурний дріт.

Ріжуть м'який дріт до .016" / 0,41 мм.



IX911, IX912, IX913

IX911

КУСАЧКИ ЛІГАТУРНІ

Малі гострі кінчики полегшують доступ у важкодоступних ділянках.

Твердосплавні вставки забезпечують точне різання лігатур
до .012" / 0,30 мм.

IX912 - тонкі кінчики для зручного доступу у важкодоступних ділянках.

Точне різання лігатурного дроту до .015" / 0,40 мм.

IX913 (інд.) - мають ті самі характеристики, що й IX912, але без твердосплавних вставок.

Підходять для точного різання м'якого лігатурного дроту
до .012" / 0,30 мм.

ДОПОМІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ



IX800, IX801



IX802



IX803



IX804

IX800

ЩИПЦІ ВАЙНГАРТ (WEINGART)

Насічки на кінчиках надійно утримують дугу, а звужена форма забезпечує зручний доступ між брекетами.

Для дуг до .022" x .028" / 0,56 x 0,71 мм.

IX801

ЩИПЦІ ВАЙНГАРТ (WEINGART) З ВСТАВКАМИ Т.С.

Мають таку саму конструкцію, як IX800, твердосплавні вставки забезпечують надійне утримання дуги та запобігають ковзанню.

Для дуг до .022" x .028" / 0,56 x 0,71 мм.

IX802

ЩИПЦІ ВАЙНГАРТ (WEINGART)

Точні робочі кінчики з насічками надійно утримують дуги та запобігають їх ковзанню. Підходять для безпечного й зручного встановлення або зняття дуг.

Утримують дугу до .030" / 0,76 мм.

IX803 (інд.)

ЩИПЦІ ВАЙНГАРТ (WEINGART) З ВСТАВКАМИ Т.С.

Ті самі переваги, що й IX802, але твердосплавні вставки забезпечують максимальний контроль і підвищену зносостійкість.

Утримують дугу до .030" / 0,76 мм.

IX804

ЩИПЦІ ВАЙНГАРТ (WEINGART) З ТОНКИМИ ЩІЧКАМИ

Міцні універсальні щипці з тонкими робочими кінчиками для зручного доступу до важкодоступних ділянок.

Утримують дугу до .022" x .028" / 0,56 x 0,71 мм.



IX827

IX827

ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ БРЕКЕТІВ, ПРЯМІ

Тонкі робочі кінчики забезпечують безпечне та комфортне зняття брекети́в із поверхні зуба.



IX828

IX828

ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ БРЕКЕТІВ, КУТОВІ

Кут 60° забезпечує зручний доступ до бокових ділянок і контрольоване зняття брекети́в.



IX826

IX826

ЩИПЦІ ДЛЯ ЗНЯТТЯ КІЛЕЦЬ

Пластиковий наконечник та подовжена ручка для точного й зручного зняття молярних кілець. Пластиковий наконечник лягає на оклюзійну поверхню моляра, в той час як інший кінець щипців стає в зручну позицію, щоб зловити гінгівальний край кільця.



IX896S

IX896S

ЗМІННІ ПЛАСТИКОВІ ВСТАВКИ 1/8" (4MM)



IX895S

IX895S

ЗМІННІ ПЛАСТИКОВІ ВСТАВКИ 3/16" (5MM)

ЩИПЦІ ДЛЯ ВИГИНАННЯ ДУГ



IX810, IX872



IX700



IX814, IX164



IX830

IX810

ЩИПЦІ "ПТАШИНИЙ ДЗЬОБ"

Точні робочі кінчики забезпечують зручне та контрольоване формування вигинів.

Універсальні щипці для роботи з круглими дугами до .028" / 0,71 мм.

IX872

ЩИПЦІ "ПТАШИНИЙ ДЗЬОБ" З ТВЕРДОСПЛАВНИМИ ВСТАВКАМИ (Т.С.)

Забезпечують точний контроль, міцність і довший термін служби.

Універсальні щипці з твердосплавними вставками для круглих дуг до .028" / 0,71 мм.

IX700

ЩИПЦІ УНІВЕРСАЛЬНІ З ВІДРІЗОМ

Універсальні щипці з насічками для згинання та різання дроту.

Згинають жорсткий дріт до .039" / 1,0 мм, ріжуть до .028" / 0,7 мм.

IX814

ЩИПЦІ О'БРАЙНА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПЕТЕЛЬ

Ідеальні для створення петель Bull, Omega та Closing.

Підходять для роботи з круглим і прямокутним дротом до .021 x .025" / 0,55 x 0,64 мм.

IX164 (інд.)

ЩИПЦІ АДАМСА (ADAMS)

Щипці з твердосплавними вставками. Твердосплавні робочі кінчики стійкі до деформації та зношування, забезпечують точність під час виготовлення ортодонтичних апаратів.



Підходять для згинання жорсткого дроту до .039" / 1,00 мм.

IX830

КОНТУРНІ ЩИПЦІ ХОЛЛОУ

Для точної корекції петель і піднебінних дуг. Кінчики Convex/Concave забезпечують просте формування.

Підходять для сталевих і NiTi-дуг.



IX815

IX815

ЩИПЦІ НАНСА

Робочі кінчики мають 4 розміри — 3, 4, 5 і 6 мм — для точного формування петель. Скошені краї запобігають пошкодженню дроту.

Підходять для круглих і квадратних дуг до .022" / 0,56 мм.



IX817

IX817

ІНСТРУМЕНТ DE LA ROSA, ДЛЯ КОНТУРУВАННЯ ДУГ

Точно підігнані увігнуті й опуклі кінчики забезпечують плавне контурування легких дротяних петель. Дозволяють формувати дуги без небажаного торку.

Підходять для дроту до .021" x .025" / 0,55 x 0,64 мм.



IX832

IX832

ЩИПЦІ ДЛЯ V-ПОДІБНОГО ВИГИНУ

Створюють V-вигини 1 мм на ортодонтних дугах, щоб запобігти їх зміщенню. Міцний кінчик твердосплавних вставок забезпечує довговічність інструмента.

Підходять для NiTi-дуг до .018" / 0,46 мм.



СКАНУЙТЕ
для перегляду
відеоінструкції



IX812

IX812

ЩИПЦІ ТВІДА ДЛЯ ПЕТЕЛЬ, З ВІДРІЗОМ

Ідеальні для створення однакових петель. Робочий кінчик має три секції — 1,2 мм, 1,8 мм і 2,0 мм, а жорстка поверхня запобігає ковзанню дроту.

Вбудовані кусачки дозволяють різати дріт .014"–.020" / 0,36–0,51 мм. Підходять для круглих і квадратних дуг до .021 x .025" / 0,55 x 0,64 мм.



IX813

IX813

ЩИПЦІ ТВІДА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДУГ

Призначені для торку та згинання квадратних і прямокутних дуг. Робочі пластини залишаються паралельними при відкритті .020", що забезпечує точний контроль.

Підходять для дуг до .021" x .025" / 0,55 x 0,64 мм.



IX871

IX871

ЩИПЦІ ТВІДА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ДУГ, З Т.С.

Ті самі функції, що і IX813, але з додатковими твердосплавними вставками для максимального контролю дроту та покращеного захоплення.

Призначені для торку та згинання квадратних і прямокутних дуг.



IX705

IX705

ЩИПЦІ ДЛЯ ВИГИНАННЯ ПІДНЕБІННИХ БЮГЕЛІВ

Робочі кінчики з профільованими виїмками надійно утримують дуги великих розмірів. Ширина робочої частини — 0.12" / 3,05 мм. Також підходять для подвійних і потрійних зворотніх вигинів.

Згинають круглі, квадратні та прямокутні дуги до .036" / 0,9 мм.



IX816, IX819, IX702

IX816

ТРИЩІЧНІ ЩИПЦІ

Для рівномірного контурування та згинання дуг без пошкодження. Заокруглені кінчики і міцна суцільна конструкція.

Для дроту до .030" / 0,76 мм.

IX819 (інд.) – компактні трищічні щипці для точного контурування та згинання дроту до .020" / 0,51 мм.

IX702 (інд.) – надійно утримують дріт і допомагають виконувати точні корекції. Виготовлені з якісної нержавіючої сталі для міцності та стійкості до корозії.

Підходять для жорсткого дроту до .039" / 1,0 мм.



IX703

IX703

ЩИПЦІ ЯНГА

Підходять для формування дуг, а також петель на іклах.

Призначені для роботи з жорстким дротом до .039" / 1,0 мм.



IX976

IX976

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ КРОК-СХОДИНКИ 0.5MM НА ДУЗІ

Для створення вигинів першого та другого порядку .020" / 0,5 мм без зняття дуги. Двостороння голівка зручна для роботи в обмеженому просторі.

Для дуг до .018" x .018" / 0,46 x 0,46 мм.



СКАНУЙТЕ
для перегляду
відеоінструкції



IX975, IX980

IX975

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ КРОК-СХОДИНКИ 0.75MM НА ДУЗІ

Для точного інтраорального формування вигинів .029" / 0,75 мм без зняття дуги. Двостороння голівка зручна для роботи в обмеженому просторі.

Для дротів до .018" x .018" / 0,46 x 0,46 мм.

IX980

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ КРОК-СХОДИНКИ 1 MM НА ДУЗІ

Для дротів до .019" x .025" / 0,48 x 0,64 мм.



IX820, IX834

IX820

ЩИПЦІ ДЛЯ ЗАТИСКАННЯ ГАЧКІВ

Призначені для утримання та встановлення гачків і допоміжних елементів. Робочий кінчик із пазом надійно утримує елемент і забезпечує точне обтискання на дузі.

IX834 (інд.)

ЩИПЦІ ДЛЯ ЗАТИСКАННЯ СТОПЕРІВ

Для точного встановлення стоперів на дугу. Заглиблення на робочих кінчиках надійно утримують стопер під час фіксації.

РУЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ТА ЗАТИСКАЧІ



IX954

IX954

ЩИПЦІ ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ЗАГИНАННЯ НІТІНОВИХ ДУГ

Для згинання дуги на 90° біля щічної трубки. Контурний кінчик забезпечує близький доступ, а насічки надійно утримують дугу. Підходять для дуг розміром від .016" (0,41 мм) до .021" x .025" (0,55 x 0,64 мм).



СКАНУЙТЕ
для перегляду
відеоінструкції

IX953 (інд.)

ЩИПЦІ CINCH BACK PLIER

Щипці Cinch Back Plier забезпечують зручний доступ до дистального кінця щічної трубки, дозволяючи сформувати акуратний загин.

Підходять для нікель-титанових дуг розміром .012"–.018" (0,30–0,46 мм).



DB05-0321

DB05-0321

ДЛЯ ДИСТАЛЬНОГО ЗАГИНАННЯ СТАЛЕВИХ ДУГ

Універсальний інструмент із точним робочим кінчиком для різних ортодонтичних маніпуляцій.



IX841

IX841 (інд.)

ЩИПЦІ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СЕПАРАТОРІВ

Для зручного встановлення сепараційних еластиків. Підрізи на кінчиках запобігають зісковзуванню еластиків.



IX866

IX866

ПОЗИЦІОНЕР БРЕКЕТІВ 3.5MM - 5MM, ДЛЯ .018 ПАЗУ

Для точного позиціонування бреккетів .018.

Діапазон вимірювання — 3,5–5 мм.



IX867

IX867

ПОЗИЦІОНЕР БРЕКЕТІВ 3.5MM - 5MM, ДЛЯ .022 ПАЗУ

Для точного позиціонування бреккетів .022.

Діапазон вимірювання — 3,5–5 мм.



IX861

IX861 (інд.)

ГОЛКОТРИМАЧ МАТЬЄ , 3 Т.С., ДЛЯ МЕТАЛЕВИХ ЛІГАТУР

Міцні заокруглені кінчики призначені для зручного скручування лігатурного дроту. Оснащений твердосплавними вставками для підвищеної міцності та довговічності.



IX862

IX862

ГОЛКОТРИМАЧ МАТЬЄ (MATHIEU)

Міцні заокруглені кінчики призначені для зручного скручування лігатурного дроту.



IX863, IX940

IX863

ГОЛКОТРИМАЧ СМАХА ДЛЯ ЕЛАСТИЧНОЇ ЛІГАТУРИ, ПРЯМИЙ

Тонкі кінчики забезпечують точне розміщення лігатур та легкий доступ у роті пацієнта, забезпечуючи комфорт. Рукоятка зі sprужинним механізмом зменшує втому рук лікаря.



СКАНУЙТЕ
для перегляду
відеоінструкції

IX940 (інд.)

ГОЛКОТРИМАЧ СМАХА ДЛЯ ЕЛАСТИЧНОЇ ЛІГАТУРИ, ЗАГНУТИЙ

Тонкі вигнуті кінчики для зручного встановлення еластичних лігатур на брекети.



DB05-0409

DB05-0409

ГОЛКОТРИМАЧ СМАХА ДЛЯ ЕЛАСТИЧНОЇ ЛІГАТУРИ, ПРЯМИЙ

Тонкі робочі кінчики з насічками забезпечують точне встановлення еластичних лігатур.



IX855

МОСКІТ ПРЯМИЙ

Тонкі кінчики з насічками забезпечують точне встановлення та надійне утримання еластичних лігатур.



IX941

МОСКІТ ВИГНУТИЙ

Ультратонкі вигнуті кінчики з насічками для точного встановлення еластичних лігатур у важкодоступних ділянках.



DB05-0715

МОСКІТ ПРЯМИЙ

Тонкі робочі кінчики з насічками забезпечують точне встановлення еластичних лігатур.



DB05-0315C

МОСКІТ ВИГНУТИЙ

Вигнутий затискач для надійного утримання лігатури без зісковзування.



IX630

IX630

ПІНЦЕТ З ПОЗИЦІОНЕРОМ

Пружинний механізм зворотної дії надійно утримує брекет до моменту його встановлення. Позиціонувальна пластина допомагає точно вирівняти паз брекета, а кутовий кінчик 90° покращує доступ і контроль під час фіксації.



IX850

IX850

ПІНЦЕТ З ПОЗИЦІОНЕРОМ

Надійно утримує брекет до моменту встановлення. Позиціонувальна пластина допомагає точно вирівняти паз, а кутовий кінчик 45° забезпечує кращий доступ і контроль.



IX631

IX631

ПІНЦЕТ З ТОНКИМИ ЩІЧКАМИ

Має таку саму якісну обробку, як IX630, але оснащений тонкими кінчиками для зручного встановлення брекетів і атакментів.



DB05-0420

DB05-0420

ПІНЦЕТ З ПОЗИЦІОНЕРОМ

Пінцет із позиціонувальною пластиною для точного встановлення. Робочі кінчики з насічками та механізм зворотної дії забезпечують надійне утримання.




DB05-0421

DB05-0421

ПІНЦЕТ З ТОНКИМИ ЩІЧКАМИ

Зворотний пінцет із тонким кінчиком і позиціонувальною пластиною.

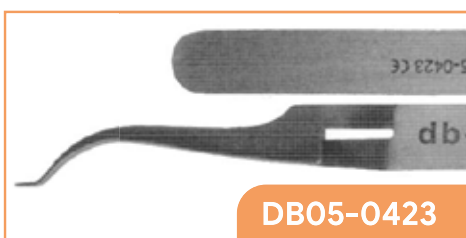

DB05-0423

DB05-0423

ПІНЦЕТ ДЛЯ МОЛЯРНИХ ТРУБОК

Зворотний пінцет для щічних трубок, брекетів та атакментів. Вигнута форма забезпечує зручний огляд під час встановлення.




IX650 (інд.)
ЗОНД ОДНОСТОРОННІЙ

Багатофункціональний інструмент з ергономічними ручками для комфорту та ефективності.



IX651
ЗОНД ДВОСТОРОННІЙ

Підходить для різних клінічних задач. Точно виготовлений робочий кінчик забезпечує зручну роботу, а ергономічна ручка — надійне захоплення та комфорт.

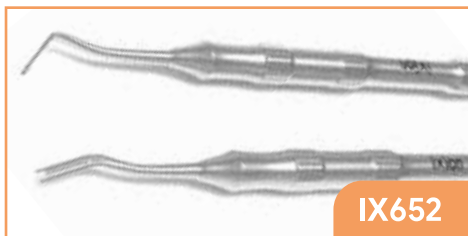

IX652
ВИЛКОПОДІБНИЙ ЗОНД

Призначений для підгинання лігатур і введення дуг.




DB05-0312
ЗОНД ДВОСТОРОННІЙ

Двосторонній ортодонтичний інструмент з точними кінчиками для універсального використання.



DB05-0311
ЗОНД ВИЛКОПОДІБНИЙ

Інструмент для роботи з лігатурами: один кінець має виїмку, інший — вигнуту форму.

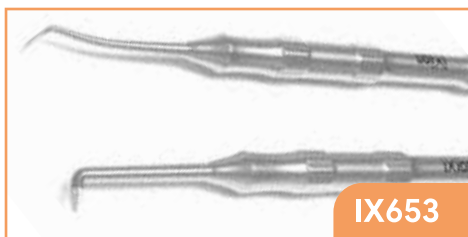

IX653 (інд.)
ТРИМЕР МІТЧЕЛА (MITCHELL TRIMMER)

Широко використовується в різних стоматологічних спеціальностях. Ергономічний дизайн забезпечує комфорт і точність роботи, а сатинована поверхня усуває відблиски.

ПІДСТАВКИ ТА ОРГАНАЙЗЕРИ



IX101

IX101

ПІДСТАВКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ, МАЛА

Підходить для зберігання 8 щипців.

Розмір: S — 110 мм довжина × 120 мм висота.

Виготовлена з нержавіючої сталі та може стерилізуватися в автоклаві.



IX102

IX102

ПІДСТАВКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ, СЕРЕДНЯ

Підходить для зберігання 12 щипців.

Розмір: M — 155 мм довжина × 120 мм висота.

Виготовлена з нержавіючої сталі та може стерилізуватися в автоклаві.



IX103

IX103

ПІДСТАВКА ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ, ВЕЛИКА

Підходить для зберігання 22 щипців.

Розмір: L — 310 мм довжина × 120 мм висота.

Виготовлена з нержавіючої сталі та може стерилізуватися в автоклаві.

ДОГЛЯД, СТЕРИЛІЗАЦІЯ ТА ЗАПОБІГАННЯ КОРОЗІЇ

ВАЖЛИВО: інструменти Ixion постачаються нестерильними. Перед першим і кожним наступним використанням їх потрібно очистити, продезінфікувати, оглянути та простерилізувати відповідно до інструкції виробника, параметрів обладнання та затвердженого протоколу клініки.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ОБРОБКИ

1. ПІСЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

Не допускайте висихання біологічних рідин. Обробляйте інструменти якомога швидше після роботи.

2. ОЧИЩЕННЯ

Використовуйте рН-нейтральний мийний засіб. Не застосовуйте хлоровані або сольові розчини, металеві щітки чи абразивні губки.

3. ОПОЛІСКУВАННЯ ТА СУШІННЯ

Після миття ретельно ополосніть інструменти, бажано демінералізованою водою, і повністю висушіть їх перед пакуванням.

4. ОГЛЯД І ЗМАЩУВАННЯ

Перевірте ріжучі поверхні, шарніри, пази, отвори, зношення та корозію. За потреби змастіть шарніри медичним мастилом, сумісним із паровою стерилізацією.

5. ПАКУВАННЯ

Пакуйте лише чисті, сухі й справні інструменти. Шарнірні інструменти стерилізуйте у відкритому положенні.

ПАРОВИЙ АВТОКЛАВ

Використовуйте цикл парової стерилізації відповідно до інструкції виробника автоклава та внутрішнього протоколу клініки.

Температура	Час витримки
121°C	15 хв
132°C	4 хв
134°C	мін. 3 хв

- Не використовуйте flash-стерилізацію.
- Після циклу інструменти мають повністю висохнути й охолонути. Орієнтовний час сушіння/охолодження — 20 хв.
- Зберігайте у сухому чистому місці, у неущодженому стерильному пакуванні.

ЯК ЗАПОБІГТИ КОРОЗІЇ ТА ПОЯВІ ПЛЯМ

Іржа, плями або зміна кольору найчастіше пов'язані не з матеріалом інструмента, а з умовами очищення, ополіскування, сушіння або стерилізації.

- ретельно висушуйте після миття та стерилізації;
- не залишайте інструменти вологими;
- використовуйте рН-нейтральні мийні засоби;
- не використовуйте хлоровані або сольові розчини;
- для фінального ополіскування бажано застосовувати демінералізовану воду;
- не обробляйте іржаві інструменти разом з іншими;
- інструменти з ознаками корозії одразу вилучайте з використання;
- за потреби передавайте інструменти на професійне відновлення.

Недостатнє сушіння може спричинити поверхневу корозію, а контакт із хлоридами — точкову. Якщо іржавий інструмент потрапляє у спільний цикл миття, частинки корозії можуть переноситися на інші інструменти.

ТзОВ «Сервус!» є уповноваженим представником, імпортером та ексклюзивним дистриб'ютором DB Orthodontics Ltd в Україні.



SERVUS!™

З НАМИ ЗРУЧНО

Львів:
(067) 735 40 47
(050) 283 65 49

Київ:
(097) 397 65 56

Дніпро:
(097) 734 85 36

Одеса:
(068) 380 22 13



Instagram: [servus.ua](#)
Facebook: [Servus UA](#)
Email: info@servusua.com
Сайт: www.servusua.com

© 2026 ТзОВ «Сервус!». Усі права захищено.

Авторські тексти, переклад, структура та графічне оформлення цього каталогу охороняються авторським правом. В каталозі використані інформація та фотоматеріали, надані компанією DB Orthodontics Ltd. Права на оригінальні фотоматеріали, торговельні марки та фірмові позначення належать їхнім відповідним правовласникам.